

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### ELEKTRONICZNY DŁUGOPIS DO MASAŻU RelaxPen

#### 1. KOMPONENTY

1 x długopis RelaxPen

1 x 2 końcówki

2 x żel do zabiegu

1 x opakowanie

1 x instrukcja obsługi (instrukcja jest w języku angielskim, instrukcję w języku polskim znajdziesz na naszej stronie - <https://www.droplead.co/pl/instrukcje/> )

#### 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

rozmiar: 20 x 3 cm

waga: 160 g

napięcie: 1,5 V

bateria: 1 x baterie AA (brak w zestawie)

główny kolor: srebrny

materiał: magnes, stop

#### 3. SPOSÓB UŻYCIA

1. aby uruchomić urządzenie należy odkręcić element 1 i 2 od siebie i wsadzić tam baterię AA (minusem do sprężynki)
2. na element 3 zakładamy jedną z dwóch końcówek, które są w zestawie (końcówki się wkręca i wykręca - możesz również stosować końcówkę, która jest przymocowana na stałe)

3. w celu uruchomienia urządzenia należy wcisnąć czarny guzik z plusem (oznaczony na obrazku cyfrą 4)

4. na wyświetlaczu pojawi się cyfra zero w kolorze czerwonym

5. urządzenie ma aż 9 stopni mocy (1 - najniższy, 9 - najwyższy), które można ustawić poprzez przycisk 4 i 5 (3 - zwiększa poziom, 4 - zmniejsza; przyciski mają symbol + i -)

6. uruchomiony długopis należy przyłożyć do bolącego miejsca

7. aby włączyć urządzenie należy zejść do poziomu zero poprzez przycisk 5 (-) i przytrzymać go przez kilka sekund

8. zarówno przy włączeniu jak i wyłączeniu usłysz wyraźny dźwięk

9. przed wykonaniem zabiegu możesz posmarować miejsce, które będziesz chciał poddać zabiegowi żelem, który znajduje się w zestawie


**\*zdjęcie na końcu instrukcji\***

#### 4. OPIS PRODUKTU:

Elektroniczny masażer pozwoli Ci na przeprowadzenie terapii akupunktury bez przekuwania skóry. Dzięki odpowiedniemu napięciu możesz rozluźnić spięte mięśnie i poczuć ulgę.

#### 5. PUNKTY AKUPUNKTURY - ODPOWIADAJĄ NA DANE SCHORZENIA


1. kołotanie serca, nadmierne pocenie się, zmęczenie, anemia, słabe krążenie w kończynach, zawroty głowy, słaba pamięć, owrzodzenie jamy ustnej i koszmary senne

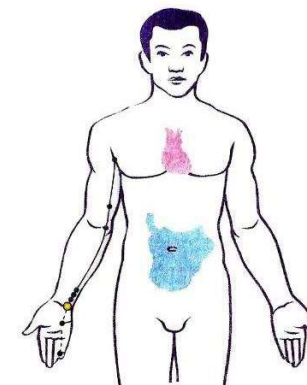


2. przewlekły kaszel, bóle ramion i szyi, ból gardła, zespół TMJ, obrzęk gruczołów, słabe krążenie w kończynach




3. zapalenie stawów, ból stawów, ból w dole pleców, zmęczenie, przyspieszony puls, zaburzenia układu moczowego, infekcje pęcherza, zapalenie uszu, zapalenie gruczołu krokowego, zmniejszenie popędu płciowego, problemy z reprodukcją

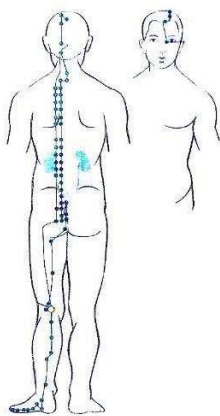


4. dziedziczne dolegliwości, dysfunkcje seksualne, impotencja, infekcje pęcherza moczowego, szum w uszach, obrzęk, przedwczesne siwienie, zawroty głowy, osteoporoza, anoreksja, dolegliwości układu oddechowego

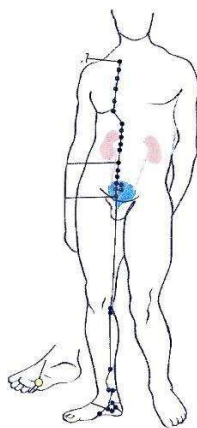


5. kołotanie serca, napady lęku, drgawki, nudności, poranne mdłości, choroba lokomocyjna, zaburzenia macicy, problemy z menstruacją, depresja, zaburzenia dwubiegunowe, suchość w jamie ustnej, wysokie gorączki

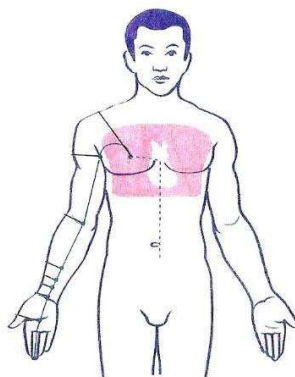


6. depresja, wahania nastroju, rozdrażnienie, dreszcze, ból gardła, bóle uszu, szumy uszne, niewyraźne widzenie, bóle głowy, opryszczka

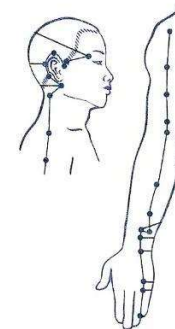


7. bóle głowy, migrena, bóle żeber, zapalenie stawów kończyn dolnych, obrzęk kolan, osłabienie i drętwienie nóg, kamienie żółciowe, bezsenność, lęk, rwa kulszowa, przewlekłe zmęczenie

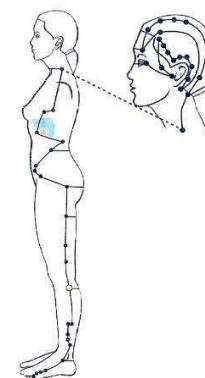


8. zaburzenia, nadciśnienie, afazja, ból głowy, nudności, zaburzenia oczu i uszu, gorączka, udar, drgawki, zapalenie opon mózgowych, zanik mięśni, skurcze

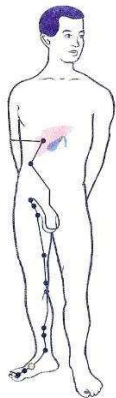


9. astma, zapalenie oskrzeli, przeziębienie, grypa, alergie, katar sienny, depresja, stres, trądzik, egzema, kaszel, infekcja zatok, ból gardła, suchość skóry

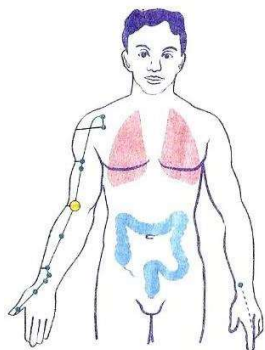

10. gorączka, alergie, katar sienny, ból głowy, kichanie, przekrwienie, przeziębienie, grypa, swędzenie, zaburzenia skórne, niedobory odporności, zaparcia, zapalenie stawów, ból w górnej części pleców

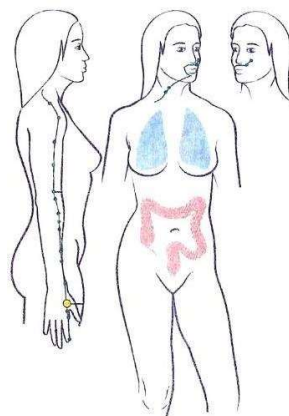


11. zgaga, kwaśny refluks, niestrawność, nudności, infekcje dróg moczowych, anoreksja, ból zębów, jęczmień, jaskra, skurcze mięśni, skurcze menstruacyjne, biegunka, zaparcia

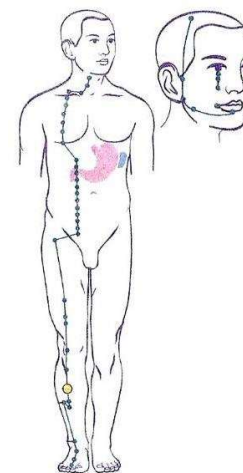

12. zaburzenia trawienia, niestrawność, nudności, refluks żołądkowy, zatrucie pokarmowe, anemia, anoreksja, zaparcia, biegunka, cukrzyca



## 6.PUNKTY AKUPUNKURY TWARZY

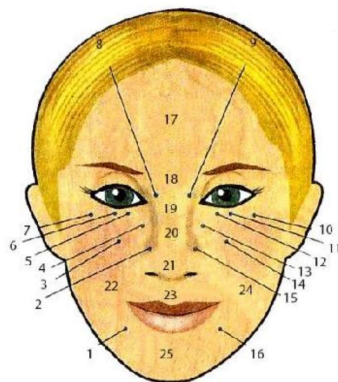


1. nogi
2. brzuch
3. jelito grube
4. pęcherzyk żółciowy
5. nerka
6. śledziona
7. jelito cienkie
8. mleko matki
9. mleko matki
10. jelito cienkie
11. śledziona
12. nerka
13. pęcherzyk żółciowy
14. jelito grube
15. brzuch
16. nogi
17. stres

18. serce
19. płuca
20. wątroba
21. śledziona
22. kolana
23. pęcherz moczowy/ genitalia
24. kolana
25. nerka/ artretyzm

Podczas pielęgnacji twarzy pamiętaj, aby zawsze używać masażera na niższym ustawieniu (1-3). Zwracaj szczególną uwagę, aby uniknąć oczu i błon śluzowych.

## 7.PUNKTY AKUPUNKURY DŁONI

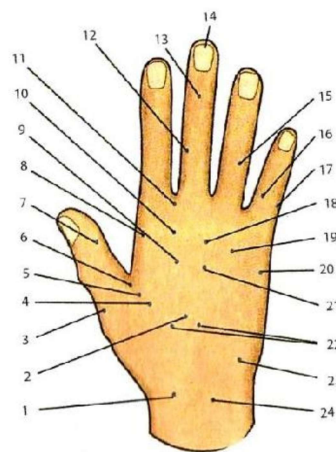

1. malaria
2. lędźwie
3. kostka

4. ból
5. sen
6. nos
7. oczy
8. ramiona
9. stopy
10. szyja
11. plecy
12. głowa
13. czkawka
14. wypadek
15. głowa
16. krocze
17. zaćma
18. gardło
19. nerwy statyczne
20. kręgosłup
21. biegunka
22. biodra
23. swędzenie
24. wzmacniacz energii

## 8.UWAGI

1. nie wolno używać masażera, jeżeli masz rozrusznik serca, regulator tętna, sztuczne serce, płuca lub inne elektroniczne urządzenia podtrzymujące życie
2. zabrania się korzystania w wannie, pod prysznicem lub w innym miejscu o wysokiej wilgotności ]
3. nie stosować wokół błon śluzowych lub wewnątrz ciała